

FootBalance MEDICAL

UNIQUE
AS
YOU



FootBalance 
MEDICAL



İÇİNDEKİLER

FootBalance Kimdir?.....	4
FootBalance Neden Farklıdır?.....	5
FootBalance Medikal Kiosk.....	6
MyFootBalance 3D.....	7
FootBalance Medikal Konsepti	8
FootBalance FitPro	9
FootBalance Medical Serisi	10-11
FootBalance Spor ve Günlük Kullanım Serisi	12-13
FootBalance Deri Ortopedik Serisi	14
FootBalance Tabanlık Kamaları.....	15
Ortopedik Tabanlıkların Eşsiz Özellikleri	16
Pazarlama Materyalleri	17
Sıkça Sorulan Sorular	18-19

FootBalance Kimdir?

Eşsiz Finlandiya teknolojisine sahip FootBalance, patentli ısı teknolojisi ile bulunduğunuz merkezde sadece 10 dakika içinde kişiye özel ortopedik tabanlıkları, zaman alan kalıp alma işlemi olmaksızın, hızlı ve doğru bir şekilde doğrudan hastanızın ayaklarına ve ihtiyacına göre şekillendirmenize olanak tanır. Kişiyeye özel şekillendirme işlemi, hastanın ziyareti sırasında bulunduğu yerde ve anında yapılır.

FootBalance, geliştirdiği inovatif ısı teknolojisi ile; sadece 10 dakika içinde bulunduğunuz merkezde ayak analizi hizmeti ve %100 kişiye özel ortopedik tabanlık şekillendirme imkanı sunar.

FootBalance Konsepti; ayak rahatsızlıkları ve yanlış dizilime bağlı sorunlar yaşayan hastalara, kişiye özel, hızlı ve ekonomik bir çözüm imkanı sunabilmek için sağlık uzmanlarını yeni ve eşsiz bir teknoloji ile tanıştıtır.

FootBalance %100 kişiye özel ortopedik tabanlıkları hangi durumlarda kullanılır?

- İçe/dışa basma, düz taban(pes planus), yüksek kavis (pes cavus)
- Morton nöroma, metatarsalji, topuk dikenini, plantar fasiit
- Aşil tendiniti, halluks valgus, diyabet benzeri basış bozuklukları ve ayak rahatsızlıkları için kullanabilirsiniz.

Ayrıca tüm spor ve günlük yaşam faaliyetlerinde kişiye özel destek ve ekstra konfor sunar. Sporcular için destek, konfor ve performans artışı sağlar.



FootBalance Neden Farklıdır?

FootBalance, eşsiz patentli ısı teknolojisi ile bulunduğunuz merkezde sadece 10 dakika içinde kişiye özel ortopedik tabanlıkları, zaman alan kalıp alma işlemi olmaksızın, hızlı ve doğru bir şekilde doğrudan hastanızın ayaklarına ve ihtiyacına göre şekillendirmenize olanak tanır. Kişiye özel şekillendirme işlemi, hastanın ziyareti sırasında bulunduğu yerde ve anında yapılır.

• **Medikal, spor aktivitelerine özel ve günlük kullanım olmak üzere 3 farklı ürün kategorisi vardır.** Ürün gamı, farklı yastıklama ve sertlik derecelerini içermektedir.

- Ayakkabı numaranızı büyütmez, bir ayakkabıdan diğerine rahatça taşıyabilirsiniz. Çok ince ve hafiftir.
- Isı altında aynı tabanlık defalarca şekillenebilir.
- Tabanlıklar dinamiktir. Dinamik çekirdekleri sayesinde 6-9 derece arasında esner. Oldukça konforludur.
- Performansa katkıda bulunur. Koruyucu ve destekleyicidir.
- Anti-bakteriyel iyonize gümüş kaplaması koku ve nemi önler.

Medikal koleksiyon her bir hastanın özel ihtiyacını sağlayacak ortopedik tabanlıklarını hızlı ve doğru biçimde hazırlamanıza izin veren farklı ayak kamaları ve dolgu malzemeleri içerir.

Bağımsız sağlık kuruluşları tarafından yapılan incelemeler ve bilimsel araştırmalar sonucunda; FootBalance ortopedik tabanlıklarının, doğal ayak fonksiyonu ve kas aktivasyonunu arttıran, hizalama hatalarını düzeltten, şoku emen, dinamik ve esnek olduğu kanıtlanmıştır.

FootBalance Medikal Kiosk

Eşsiz Finlandiya teknolojisi, özel patentli ısı sistemi ile %100 kişiye özel ortopedik tabanlıklarınız 10 dakika içinde hazır!

FootBalance kiosku ile hastalarınızın ayak analizlerini yapabilir ve sadece 10 dakika içinde ihtiyaçları olan %100 kişiye özel ortopedik tabanlıklarını bulduğunuz merkezde hazırlayabilirsiniz.

Dokunmatik ekranı sayesinde hastalarınızı bilgilendirebilir, basışlarını fotoğraflayabilir ve analiz raporunu hastalarınız ile e-posta yoluyla paylaşabilirsiniz.

FootBalance bu eşsiz hizmeti, FootBalance kiosku ve özel olarak geliştirdiği patentli ısı teknolojisi sayesinde sizlere vermektedir.

Kiosk şu parçalardan oluşur;

Dokunmatik ekranlı bilgisayar, podoskop, kamera, FitPro yazılımı, FitPillow ve özel patentli fırın.



Genişlik : 630mm
Derinlik : 630mm
Yükseklik: 1449mm

MyFootBalance 3D

Eşsiz Finlandiya teknolojisinin yeni ürünü MyFootBalance 3D ayak analizi ve ısı altında tabanlık şekillendirme sistemi

Eşsiz Finlandiya teknolojisinin yeni ürünü MyFootBalance 3D ayak analizi ve ısı altında tabanlık şekillendirme sistemi

10.000 sensör ve 4 kamera barındıran My FootBalance 3D sistemi ile yapılan analiz sonucunda ayak sağlığı ile ilgili tüm veriler 3 boyutlu olarak oluşturulur. Ayak uzunluğu, ayak genişliği, tarak ve topuk genişliği gibi ölçümsel veriler ve düz taban, içe-dışa basma gibi problemli durumlar da tüm detayları ile belirlenir.

My FootBalance 3D sisteminin dakikalar içinde ortaya çıkardığı ve rapor haline getirdiği veriler doğrultusunda yaş, boy, kilo ve

Kiosk şu parçalardan oluşur;

55 cm dokunmatik ekran,
16 adet 4K kamera,
10 bin sensörden oluşan yüzey,
3 boyutlu ayak ve basış modelleme,
Özel patentli fırın, FitPillow, Tabanlık ve OS1st önerisi.

aktivite düzeyinize en uygun %100 kişiye özel ortopedik tabanlık belirlenir ve patentli ısı teknolojisi kişiye özel olarak şekillendirilir. Ayrıca sağlık ve konforunuz için en uygun ayakkabı önerilerini anında öğrenebilirsiniz.

Tüm bu işlemler sadece 10 dakika içinde gerçekleşir ve kişiye özel detaylı raporu mail olarak iletilir.



FootBalance Medikal Konsepti

Ayak Analizi ve %100 Kişiyeye Özel Ortopedik Tabanlıklar

FootBalance Medikal Konsepti, ayak ve taban analizi yapmak ve kişiyeye özel ortopedik tabanlık şekillendirmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi içerir: Bir şekillendirme ünitesi, ortopedik tabanlık malzemeleri, ayak kamaları, eğitim ve pazarlama materyalleri.

FootBalance Medikal Konsepti ayak sağlığı değerlendirmesi ve analiz yapmayı mümkün kılan detaylı eğitim de içerir. Eğitim konu başlıkları;

- Ayak anatomisi ve biyomekaniği
- Kinetik zincir prensipleri
- Ayağın incelenmesi
- Ortopedik tabanlıkların kullanım alanları, faydaları
- Farklı sorunların olduğu durumlarda şekillendirme ve kamalama
- Uygulamada ortopedik tabanlık şekillendirme

Ayrıca, FootBalance işinizin gün geçtikçe daha başarılı olmasını sağlamak için ilave takip faaliyetleri yürütür ve bu konuda size destek olur. İş ortaklarımız; Fizik Tedavi Merkezleri, Ortez Protez Merkezleri, Hastaneler, Ortopedi ve Fiziksel Rehabilitasyon Klinikleri, Sporcu Sağlığı Merkezleri, Ayak Sağlığı Merkezleri, ilgili hekimler, fizyoterapistler ve podologlardır. FootBalance kioskları bu merkezlerde hizmet vermektedir. Sağlık uzmanları sistemin işleyişi ve tabanlığın oluşturulması konusunda eğitilmiştir.



1. FootBalance sağlık uzmanı gözlem ve elle ayağı muayene eder.



2. Ayak ve taban analizi podoskop üzerinde yapılır.



3. FitPro yazılımıyla ayak ve ayak bileklerinin fotoğrafı çekilir. Ayak ve taban analizi yapılır.



4. Kişiyeye özel ayak analiz raporu e-posta aracılığıyla hastaya gönderilir.



5. Isıtılmış ortopedik tabanlıklar her bir ayağı özel şekillendirilirken doğru ayak dizilimi korunur.



6. Her bir ortopedik tabanlık tek tek ayağı ve ihtiyaca özel şekillendirilir. Mükemmel uyum için son bir kez daha sağlık uzmanı tabanlıkları kontrol eder.



7. Gerektiğinde, kişiyeye özel kama eklenecektir.



8. FootBalance sağlık uzmanı, yeni ortopedik tabanlığın hastanın ayakkabısına tam oturmasını sağlamaktadır. Yeni tabanlıklarınız sadece 10 dakika içinde kullanıma hazır.

Ayak analizi için geliştirilen inovatif sistem: FootBalance FitPro

FitPro; FootBalance Kioskuna entegre dokunmatik bilgisayar ekranında çalışan özel bir yazılımdır. Sağlık çalışanları bu yazılım sayesinde hastanın ayak arkını fotoğraflarla eşzamanlı olarak değerlendirebilir, farklı pozisyonlarda ayak bileklerinin fotoğraflarını çekebilir ve ayaktaki yanlış dizilimleri tespit edebilirler. Bu yazılım sayesinde, görsel olarak ortopedik tabanlıkların hastaya faydalarını açıklamak oldukça kolaydır. Çekilen fotoğraflar sistem üzerinde otomatik olarak rapor haline gelir ve hastaya mail olarak gönderilebilir.

Sağlık merkezine ve hastaya değer katar

Hasta e-posta hesabına girdiğinde telefon, tablet ve bilgisayar ekranları için optimize olan kişiye özel bir ayak analizi alır. Bu rapor aynı zamanda orada bulunan ekranda da görülebilir.

Özetle, FootBalance FitPro'nun sağladığı temel faydalar şunlardır:


- Kullanımı kolay analiz yazılımı
- Kişiyeye özel analiz raporu
- Hasta verilerinin toplanmasını sağlayan FitPro analitiği
- Raporun çıktısını alabilme veya e-posta ile iletme.

FitPillow

FootBalance FitPillow ile hastanın her iki ayağı için, bir çift kişiye özel ortopedik tabanlık aynı anda şekillendirilebilir. FitPillow sayesinde, ortopedik tabanlıkları



şekillendirirken ayak ve ayak bileklerinin doğru ve normal dizilimde olmasını sağlamak çok kolaydır.

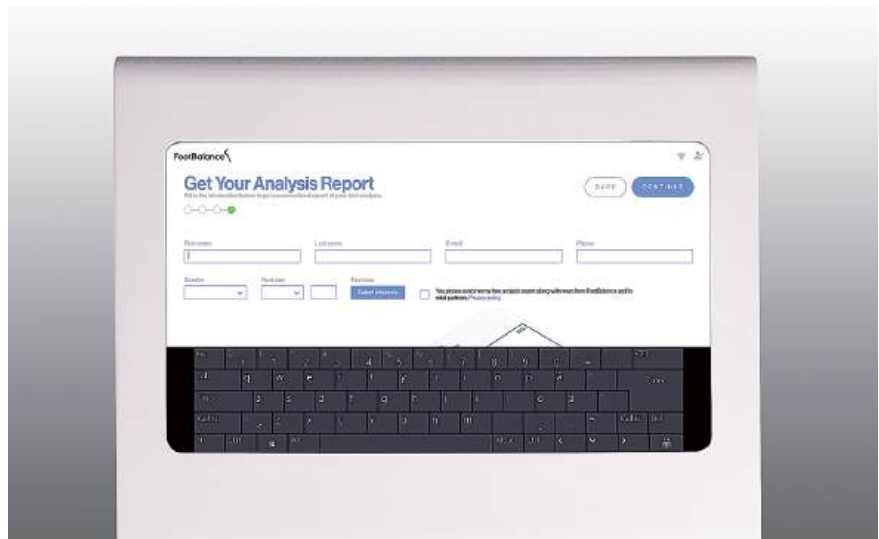

FootBalance Medical Serisi

Medical Silver

Medikal Silver ortopedik tabanlıđı ayak tabanındaki yanlış basıř problemi yođun olan kiřiler iin zel olarak geliřtirilmiřtir. Orta derece yastıklama ve gcl desteđi sayesinde ayađınızla mkemmel bir uyum sađlar.

Ark blgelerimizi desteklerken, ayak ve ayak bileđi eklemine fonksiyonlarına izin verir. Ayakkabı numaranızı bytmez. İnce, hafif ve řıktır.

Antibakteriyel, nefes alabilir zel yzeyi sayesinde koku ve nem nleyicidir.



Yastıklama:2(1-3)

Sertlik:2(1-3)

Numara:34-52

Yzey malzemesi:D-200 Gmř İyon

Ađırlık(42numara):50gr



Medical Gold

Dar ayak tipleri iin tasarlanan ince ve hafif bir ortopedik tabanlıktır. Kiřinin ayakkabısında ortez iin ok az alanın kaldıđı durumlar da mkemmel bir tercihtir. Orta seviyede yastıklama ve desteđe sahip olan Medikal Gold, ayakları desteklerken sađlıklı ve dođal ayak fonksiyonuna da izin verir.

Medikal Gold, D-200 gmř iyonlu nefes alabilen st kumař, ařınmaya dayanıklı malzemeler ve kaymayı nleyen tabandan oluřmaktadır.



Yastıklama:2(1-3)

Sertlik:2(1-3)

Numara:34-48

Yzey malzemesi:D-200 Gmř İyon

Ađırlık(42numara): 45gr



Medical Black

En üst derecede desteğe ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanmıştır. Vücut kitle indeksi 25'in üstünde olan kişiler için tavsiye edilmektedir. Bu ortopedik tabanlık, ayağın doğal bir şekilde hareket etmesine izin verirken, içe doğru aşırı bükülmesine karşı koyar. Aşırı esnek ayakları uygun şekilde desteklemek için daha fazla darbe emme kabiliyeti ve daha sert bir çekirdeği bir araya getirir. Medikal Black çok çeşitli ayak tiplerine hemen uyacak en popüler ortopedik tabanlık kalıbımızı ön plana çıkarır.

Genellikle ileri seviyede düşük ark kemeri, kilo kaynaklı pes planus, aşırı içe/dışa basma, halluks valgus gibi ayak problemlerinde önerilmektedir.



Yastıklama: 3(1-3)
Sertlik: 3(1-3)
Numara: 34-52
Yüzey malzemesi:D-200Gümüş İyon
Ağırlık(42numara): 55gr



Medical Green Soft

Medikal Green Soft, korunma ihtiyacı olan hassas ayaklar için özel olarak geliştirilmiştir. Romatizmal hastalıklar, osteoporoz, osteoartrit, plantar fasiit gibi ağırlı ayak hastalıklarının tedavilerinde benzerlerinden ayrıcalıklı bir destek ve konfor sağlar. Diyabet hastalarına özel olarak geliştirilmiştir ve bu alanda büyük bir yeniliktir.

Diyabet hastalarının ayaklarında oluşabilecek yara ve enfeksiyona karşı ayak tabanını destekleyerek homojen bir yük aktarımı sağlar. Ekstra yumuşak hafızalı dış yüzeyi sayesinde attığınız her adımda maksimum düzeyde darbe ve şok emilimi sağlar.



Yastıklama: 3(1-3)
Sertlik: 1(1-3) Ayak
Numara: 34-52
Yüzey malzemesi:D-200 Gümüş İyon
Ağırlık:50gr



FootBalance Spor ve Günlük Kullanım Serisi

%100 Balance

Yüksek darbeli aktiviteler için konforlu bir destek sunmaktadır. Amatör ve performans sporcuları için de uygundur. İçe ve dışa basan kişilere daha fazla destek vermek için tasarlanan özel bir takviye çekirdeği vardır. Hem günlük kullanım hem de sportif faaliyetlerde Impact serisinin bir alternatiftir.



Yastıklama: 2(1-3)
Sertlik: 1(1-3)
Numara: 36-48
Yüzey malzemesi: D-200 Gümüş İyon
Ağırlık(42numara): 50gr



%100 Balance Narrow

Balance Narrow, dar yapılı ince ve uzun ayak tipleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Özel çekirdek yapısı sayesinde aktif olarak esneyebilmektedir. Ayağın doğal hareketine katılır ve destek verir. Hem günlük kullanım hem de sportif faaliyetlerde Impact serisinin bir alternatiftir.



Yastıklama: 2(1-3)
Sertlik: 1(1-3)
Numara: 34-48
Yüzey malzemesi: D-200Gümüş İyon
Ağırlık(42numara) :50gr



%100 Impact

Şiddetli topuk darbelerine maruz kalan saha sporları için geliştirilmiş bir ortopedik tabanlıktır. Impact, iyi bir darbe emici olarak, denge, stabilite ve yaralanmayı önleme konusunda daha iyi performans sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Impact ortopedik tabanlıkları, ayaklara ve ayak bileklerine gerginlik yükleyen ani ve sarsıcı ayak hareketleri ya da yoğun becerili ayak hareketleri gerektiren tüm sporlar için mükemmel bir çözümdür (basketbol, voleybol, hentbol, tenis gibi). Aşil tendinit, plantar fasiit, topuk diki, metatarsalji, morton nöroma gibi hastalıklarda topuk kısmı ve ön ayak kısmındaki özel yastıklamadan dolayı tercih edilmektedir.



Yastıklama: 3(1-3)
Sertlik: 2(1-3)
Numara: 36-52
Yüzey malzemesi: D-200Gümüş İyon
Ağırlık(42numara): 57gr



%100 Control

Sadece 41 gr. ağırlığında olan Control, tabanlıklarda minimal bir his ve hafiflik arayanlar için mükemmeldir. Hızlı ayak çalışmaları için, ani hareketlerde daha çok dinamik destek sağlar. Ayağınızı bir çorap gibi sarar. Hız ve performansın esas olduğu sporlar için harikadır. Özellikle bisiklet yakkabıları, kramponlar, patenler, sivri uçlu ayakkabılar, düz yarış ayakkabıları ve rugby botları gibi ayağı tamamen saran düşük hacimli ayakkabılarla mükemmel uyum için inceltilmiş ve sivrilmiştir. Hız ve performansın esas olduğu sporlar için harikadır!



Yastıklama: 1(1-3)
Sertlik: 2(1-3)
Numara: 36-48
Yüzey malzemesi: D-200 Gümüş İyon
Ağırlık(42numara): 41gr



FootBalance Deri Ortopedik Serisi

Deri Ortopedik Tabanlık: 3/4

FootBalance'ın %100 kişiye özel ve yenilikçi ürünlerinden biri olan 3/4, kadınların günlük şıklığını konforla buluşturur. Babet ve orta seviyede topuklu ayakkabılar gibi düşük hacimli ayakkabıların yaratmış olduğu problemleri ve rahatsızlık hissini ortadan kaldırır.

3/4 ortopedik tabanlıkları, %100 deriden yapılmıştır. Bir yandan doğru ve dengeli beden duruşu sağlarken, destekleyici yüzeyi sayesinde gün boyu rahatlık sunmaktadır.

Şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar için mükemmel bir seçimdir!



Deri Ortopedik Tabanlıkları

Kadın ve erkekler için uygun olan tabanlıklar gerçek deriden üretilmiştir. Şık ayakkabılarınız ile günlük kullanım için mükemmeldir. Konforunuz için iki farklı genişlik ve sertlik alternatifi vardır. FootBalance %100 kişiye özel ortopedik tabanlıkları ayak sağlığını artırmak, dengeli ve doğru bir vücut duruşu sağlamaya yardımcı olmak için kişiye özel ayak arki desteğini ön plana çıkarır.

MEN



DYNAMIC
Rahatlık (3,0 mm) & Profil (1,8 mm)
Siyah ve İnka kahverengi
Numara: 40-46

WOMEN



ACTIVE
Rahatlık (3,0 mm) & Profil (1,8 mm)
Siyah ve İnka kahverengi
Numara: 36-42

FootBalance Tabanlık Kamaları

FootBalance Medical Kamalar, kullanım özelliği itibariyle ortopedik tabanlığın ekstra desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılmaktadır. Ortopedik tabanlığın sertliğini arttırmak ve açısını düzenlemek için; ayrıca bacak boyu farklılığı, içe/dışa basma, topuk yükseltisi, ayak bileği açısı farklılıklarının düzenlenmesini gerektiren durumlarda da kullanılmaktadır.

AT NALI KAMA (M-HS2 BLUE)

At Nalı Kama, çok çeşitli şekillerde kullanılabilen yapıştırılabilir. Bu yapıştırıcılar, gerektiğinde, ortopedik tabanlığın sertliğini arttırmak ve açısını dengelemek amacıyla FootBalance ortopedik tabanlıklarına yapıştırılabilir. Hastanın ayaklarından biri veya her ikisini daha fazla dengelemek için en sık kullanılan yöntemdir.

At Nalı Kamaları, şekillendirilmiş bir ortopedik tabanlığa eklemek kolaydır. Önce, üzerindeki yapıştırıcı yapışkan hâle gelene kadar at nalı şeklindeki yapıştırmanın parlak kısmını ısıtın. Ardından, kamayı şekillendirilmiş

ortopedik tabanlığa bastırın. Orta kısımdan başlayarak, her iki kenar boyunca geriye, ayak parmaklarına doğru eşzamanlı olarak hareket ettirin. Yapıştıktan sonra, kenarların ortopedik tabanlığının kenarlarına göre şekil alması için eklemeyi biraz daha ısıtmanızı tavsiye ederiz. Yüzey kumaşının zarar görmemesi ya da ortopedik tabanlık şeklinin değişmemesi için çok fazla ısıtmayınız.

Numara(EUR): 34-52
büyük numaralar (13çift)
küçük numaralar (13çift)

Malzemenin kalınlığı-2mm'dir.



DÜZ KAMA (M-OR BLACK)

Düz Kamalar, gerektiği takdirde hastanızın klinik ihtiyaçlarını karşılamak için uçları kırılabilen ve Footbalance ortopedik tabanlıklarına eklenebilen kalıba göre kesilmiş takviye yapıştırılabilir. Örneğin, topuk takviyelerine bölünebilir. Yapıştırıcılar, ortopedik tabanlıklarla aynı termoplastik malzemeden yapılır.

Düz Kama yapıştırıcılarını şekillendirilmiş bir ortopedik tabanlığa eklemek kolaydır. Öncelikle yapıştırıcıyı istenen kalıba göre kesin. Malzemenin parlak tarafını yapışkan bileşiği aktifleşene kadar ısıtın, böylece

yüzeyi yapışkan hâle gelir. Ardından, yapıştırıcıyı ortopedik tabanlığın ortopedik tabanlığının kenarlarına göre şekil alması için eklemeyi biraz daha ısıtmanızı tavsiye ederiz.

Yüzey kumaşının zarar görmemesi ya da ortopedik tabanlık şeklinin değişmemesi için çok fazla ısıtmayınız.

Numara (EUR): 36-52
büyük numaralar (13çift)
küçük numaralar (13çift)
Malzemenin kalınlığı-1,5mm'dir.



Ortopedik Tabanlıkların Eşsiz Özellikleri



Antibakteriyel,
dayanıklı üst tabaka

Yüksek kalite
EVA yastıklama

Patentli TPU
denge kalıbı

Yüksek güç,
ince TPU alt tabaka



- En üst katman, nem ve koku önleyici anti bakteriyel tekstil kaplamadır. Hava alabilir.
- Yüksek konfor için özel eva yastıklaması.
- Patentli, şekillenebilir termoplastik çekirdek, dinamik ark desteği için mükemmel çözümdür.
- Yüksek koruma kapasiteli alt kaplama.
- Tabanlıklar dinamiktir. 6-9 derece arasında her adımda esneyerek ayak tabanını aktif olarak geri besler.
- Tabanlık esneyebilir dinamik çekirdeği sayesinde ayağın doğal fonksiyonuna katılır, bu nedenle çok konforludur.
- Her ayakkabı ile mükemmel uyumludur. Bir ayakkabıdan diğerine kolayca taşınabilir. Ayakkabı numarasını büyütmez.
- Tabanlıklar son derece ince, şık, hafif ve fonksiyoneldir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Ortopedik tabanlıklar sürekli olarak neme maruz kalırsa, antibakteriyel özelliğini yitirebilir. Ortopedik tabanlıkların ıslanmasını önlemenizi ve kullanmadığınız zamanlarda, ayakkabıdan kısmen çıkararak havalandırmanızı tavsiye ederiz. Ortopedik tabanlıkları temizlemek için nemli bir bezle hafifçe silin.

Nemli ortopedik tabanlıkları kullanım aralarında oda sıcaklığında havalandırın.

- Çamaşır makinesinde yıkamayın. Yüksek ısıya maruz bırakmayın.
- Ortopedik tabanlıkların ömrü her bir bireyin ayak tipine, ağırlığına, eylemlerine ve kullanma yoğunluğuna göre çeşitlilik gösterir.

- Ortopedik tabanlıklar aktif, sürekli veya yoğun olarak kullanıldığında normal seyrinden daha hızlı eskir. Bu nedenlerle, değişimli olarak kullanabilmeleri için kişiye bir çiftten fazla ortopedik tabanlık şekillendirilmesi tavsiye edilebilir.

Pazarlama Materyalleri

FootBalance merkezimize özel olarak hazırlanan banner, randevu kartları, sosyal medya tanıtımı, FootBalance Türkiye web sitesinde yer alacak iletişim bilgileri, özel logolu paspası gibi farklı pazarlama materyalleri sunar. Hekim, merkez ve hastane ziyaretlerinizde uzman çalışanlarımız sizlere destek olur.



Sıkça Sorulan Sorular

FootBalance ortopedik tabanlıkları; medikal, spor ve sporcuya özel ve günlük kullanım olmak üzere farklı kategorilerden oluşur. Tabanlık seçimi hastaların cinsiyet, kilo, yaş, aktivite düzeyi ve basış problemlerine özel olmalıdır.

FootBalance tabanlıkları, eşsiz teknolojileri ile kişinin vücut ağırlığının daha homojen bir şekilde zemine aktarılmasına yardımcı olur. Özel üst yüzey yapısı sayesinde ayak ve tabanlık arasındaki sürtünmeyi minimize eder. D-200 gümüş iyon tekstil kaplaması antibakteriyeldir, koku ve neme karşı ayağınızı korur.

Verilen hizmet nedir, işlem ne kadar sürer?

Öncelikle FootBalance kiosku kullanılarak sağlık uzmanları tarafından taban ve ayak analizi yapılır.

Kişinin ayak tipi belirlenir, kişiye uygun doğru tabanlık seçilir.

Özel patentli ısı sistemi sayesinde sadece 10 dakika içinde %100 kişiye özel ortopedik tabanlık şekillendirilir.

Hasta tabanlıkları ile beraber merkezden ayrılır.

FootBalance ürünleri neden eşsiz ve farklıdır?

- Medikal, spor aktiviteleri ve günlük kullanım amacınıza uygun farklı tabanlıklar önerir.
- Sizi ayakkabı numaranızı değiştirmek zorunda bırakmaz. Bir ayakkabıdan diğerine rahatça taşıyabilirsiniz.
- Dinamik olarak esneme özelliği vardır. Ayağınız ile mükemmel uyum ve konfor sağlar.
- Çok ince, hafif ve şıktır.
- Tabanlıklar anti bakteriyel gümüş iyon yüzey ile kaplıdır. Koku ve neme karşı etkilidir.

Tabanlıklarım ayakkabı numarasını büyütür mü?

FootBalance ürünleri ayakkabı numarasını büyütmez. Ağırlıkları 41-55 gr. arasında değişir.

Her ayakkabı ile mükemmel uyum sağlar. Bir ayakkabıdan diğerine rahatça taşınabilirler.

Taban çökmesi, düz taban, yüksek kavis için tabanlık yapıyor musunuz?

FootBalance ortopedik tabanlıkları kişinin topuk ve ön ayak bölgesine binen fazladan yükü absorbe ederek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Basınç ve ağırlığının ayağa doğru bir şekilde yayılmasını sağlar. Hastanın ihtiyacı olan ayak kavisini oluşturur. Destek sağlar. Bu problemlere özel kişinin yaşam kalitesini artıran özel tabanlıklarımız mevcuttur.

Halluks Valgus için tabanlık yapıyor musunuz?

Halluks valgus, ayak baş parmağının ikinci parmağa doğru yönelmesiyle oluşan bir deformitedir. Bu duruma sıklıkla 1. parmak başının iç kısmında "bunyon" olarak tanımlanan kemik çıkıntısı ve yumuşak doku ağrısı eşlik eder. Baş parmağı etkileyen en yaygın patolojik durumdur. Halluks

valgus gibi medikal bir probleme çözüm imkânı sunan özel tabanlığımız vardır, tabanlık kişinin konfor ve hayat kalitesini artırır.

Topuk dikenini için tabanlık yapıyor musunuz?

Topuk ağrısı, erişkinlerde en sık karşılaşılan ayak problemlerinden birisidir. Ağrının nedenleri tam olarak netleşmemekle birlikte topuk dikenini olaya eşlik edebilir. Topukta çıkıntı ortaya çıktıkça topukta irritasyon ve şişlik ortaya çıkar, sinirler ve komşu dokular bası altında kalır, sonuçta ağrı oluşur.

FootBalance hassas ciltli ayaklara özel tabanlıklarını bu ve benzer durumlarda önerir. Topukta özel bir alan yükü almak üzere boşaltılmıştır. Ekin desteği denilen topukta bulunan ekstra yastıklaması sayesinde, kişinin topuğuna binen yükü absorbe ederek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Hastanın vücut ağırlığını çok daha homojen bir şekilde topuktan alıp, ayağa yayar. Sağlıklı destek ve ekstra konfor sunar.

Diyabet hastalarına özel tabanlık var mı?

Diyabetik hastaların diğer kişilere oranla ayaklarında problem yaşama





olasılığı daha yüksektir. Diyabetli bireylerin ihmal etmemesi gereken en önemli noktalardan biri de; ayak sağlıkları ve bakımlarıdır.

Bu noktada atlanılan önemli noktalardan birisi de diyabet hastalarının ayak anatomileri, kas yapılarının zamanla değişiklik gösterebilmesidir. Ayak parmakları ve tabanında şekil bozuklukları gelişebilir. Bu durum ayakta yük taşıyan bölgeleri de beraberinde değiştirebilir. Ayağı tekrarlayan sürtünmelere ve travmalara açık hale getirebilir, nasır gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Nasır altındaki yumuşak dokuda zamanla dolaşım yetersizliğine bağlı olarak istenmeyen ülseler gelişebilir. Önlem alınmadığı takdirde, bu basit gözükken durum diyabet hastalarında hiçte arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir.

Diyabetli bireyin ayak tipini, yere nasıl bastığını, ayak tabanına nasıl ve nerelerde yük aktardığını bir uzman eşliğinde öğrenmelidir. Hastaların sağlıklı ve dengeli basıyor olmaları, ağırlıklarını homojen bir şekilde zemine aktarmaları son derece önemlidir. Bu noktada ayak sağlığı konusunda koruma amaçlı alınacak önlemlerden biri de diyabete özel ortopedik tabanlık kullanmaktır. FootBalance Medikal Green Soft özellikle daha fazla konfor ve korunma ihtiyacı olan diyabet hastalarına özel geliştirilen inovatif ve kişiye özel bir tabanlıktır.

Diz, kalça, sırt ağrılarında tabanlık faydalı olur mu?

Ayaklarımız vücudumuzun sözcüsüdür. Ayak, topuk, diz, kalça ve sırt ağrıları; yanlış basıyor olmamızdan kaynaklanabilir. Yere doğal ve dengeli basmamız ve vücut ağırlığımızı zemine homojen bir şekilde aktarmamız, beraberinde konfor ve sağlık getirecektir. Bu sebeple ortopedik tabanlık kullanılmalıdır.

Sağlıklı insanlar da ortopedik tabanlık kullanmalı mıdır?

Sağ ve sol ayağımız, aynı sağ ve sol elimiz gibi farklıdır. Ayaklarımızın yapısı bize özeldir. Ayakkabılarımız ise binlerce adet, standart olarak üretilmiştir. Kişiyi özel tabanlık kullanarak her ayakkabımızı kişiselleştirebiliriz. Ortopedik tabanlıklar herkese konfor, destek ve sağlık sunar.

Hamilelikte tabanlık kullanmalı mıyım?

Anne adaylarında, hamilelik süreci boyunca hızlı kilo artışı, değişen hormonal ve fiziksel düzen gibi sebeplerle kaslara, eklem bölgelerine ve genel olarak tüm vücut yapısına normalden fazla bir yüklenme olur. Ayakta oluşan bir deformasyon tüm vücut kinetik zincirine ciddi etkide bulunur. Ayakta durma, yürüyüş ve egzersizler esnasında çabuk yorulma kaçınılmaz durumlar olarak karşımıza çıkar. Denge kaybolması ve düşme

tehlikesi de diğer problemlerdir. Özellikle bel ağrıları, sırt ağrıları, ayak ve taban ağrıları bunların başında gelir.

FootBalance kişiye özel tabanlıklarıyla değişen kilo ve ağırlık dengelerine çok rahat uyum sağlayabilirsiniz.

Spor ve sporcular için farklı tabanlık var mı?

FootBalance, amatör ve profesyonel sporculara özel tabanlıklar önerir. Sporcunun ayakkabısının hacmi, yastıklama, performans ve destek beklentisi belirleyicidir. Tabanlıkları bir çorap gibi ayağı ve ayakkabısı ile mükemmel uyum sağlamalıdır. Basketbol, voleybol, tenis, hentbol ve koşu gibi şiddetli topuk darbelerine maruz kalınan spor dalları için ayrı, bisiklet, futbol kramponları ve kış sporları gibi çok düşük hacimli ayakkabılara ayrı tabanlıklar önerilir. Sloganı 'Sporcular için daha fazla performans herkes için konfor ve sağlık' tır.

Tabanlıkların ömrü ne kadar?

Sedanter bireylerin her yıl tabanlıklarını yenilemeleri önerilir. Profesyonel sporcular ise yıl içerisinde değiştirdikleri ayakkabı sayıları kadar tabanlık kullanmalıdırlar.

Her iki durumda hastalarımızın her 6 ayda bir ücretsiz ayak analizi için bir FootBalance merkezine uğramalarını tavsiye ediyoruz.

FootBalance

MEDICAL

OnBrands Ticaret A.Ş , FootBalance markasının yetkili distribütörüdür.
www.onbrands.com.tr

Onbrands Tekstil ve Ticaret A.Ş.
Esentepe Mahallesi, Atom Sk. No.20,
Kanyon Apt. Kat:3, Daire:5 - 34394 Şişli/ İstanbul
T: +(90) 212 325 88 51 - info@onbrands.com.tr

FootBalance hakkında bilgi için
www.footbalance.com.tr

    @FootbalanceTR

